


la belle BC

bruckhoff  
hannover**Wir begrüßen Sie in der Welt des digitalen Hörens**

Zunächst herzlichen Glückwunsch. Sie haben mit diesem Gerät ein deutsches Spitzenprodukt „Made in Germany“ erworben.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, schnell damit vertraut zu werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hören.

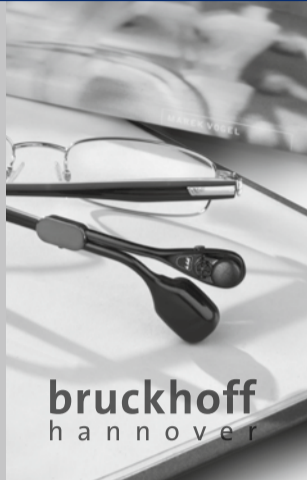bruckhoff  
hannover**Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise****■ Hinweise für die Pflege des Gerätes**

Ihr Hörgeräteakustiker hält verschiedene Pflegemittel bereit. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät läuft.

**■ Einige Tipps zum täglichen Gebrauch**

- Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie, dass Ihr Gerät auf den Boden fällt.
- Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen.

**■ Setzen Sie das Gerät bei folgenden Aktivitäten ab**

- beim Waschen oder Duschen
- wenn Sie eine Trockenhaube oder Haartrockner benutzen
- wenn Sie Haarspray benutzen
- wenn Sie als Patient mit Hochfrequenz- oder Ultraschallgeräten behandelt werden

**■ Entsorgung**

Altes Gerät und alte Batterien nicht in den Hausmüll geben. Ihr Hörgeräteakustiker wird diese gerne fachgerecht für Sie entsorgen.

**■ Service und Garantie**

Sollte Ihr Gerät einmal nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker, nachdem Sie folgende Punkte überprüft haben:

- Ist das Gerät eingeschaltet?
- Ist eine neue Batterie eingesetzt?

**Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen am Gerät vorzunehmen.**

**⚠ Allgemeine Warnhinweise**

- Batterien von Kindern und Haustieren fernhalten. Beim Verschlucken sind sie gesundheitsschädlich. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nicht in explosionsgefährdeten Räumen einsetzen.
- Nur für Sie persönlich bestimmte Hörgeräte verwenden. Andere Geräte können wirkungslos sein oder das Gehör schädigen.
- Röntgenstrahlen können das Gerät schädigen.
- Rückwärtige Warnsignale können bei Hörgeräten mit Mehrmikrofontechnik möglicherweise unzureichend wahrgenommen werden.



B07070 | 1210

0123


la belle BC

AUDIA AKUSTIK GMBH  
Herrenstraße 6  
30159 Hannover  
DeutschlandTel: +49 (0) 511-16700-0  
E-Mail: service@bruckhoff.com[www.bruckhoff.com](http://www.bruckhoff.com)bruckhoff  
hannover


# Bedienungsanleitung

## Das Bedienteil

Mit dem Bedienteil Ihres Hörgerätes können Sie spezielle Funktionen leicht selber einstellen.

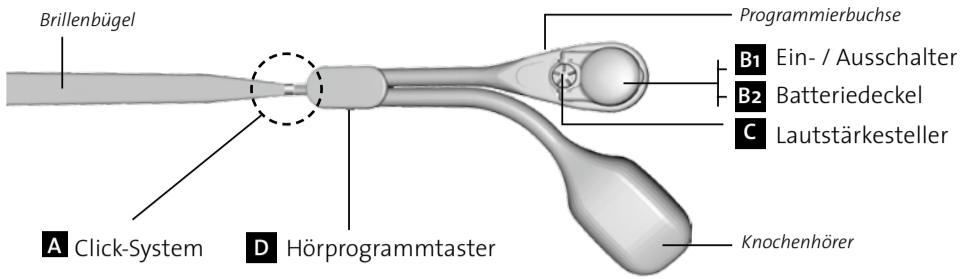

### A

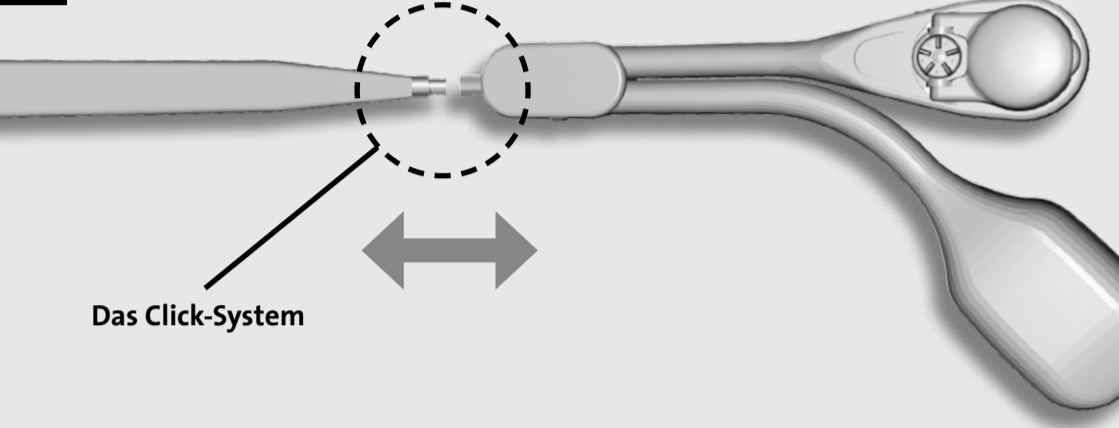



Das Click-System

### B1

#### Ein- und Ausschalter


Bei geschlossenem Batteriedeckel ist Ihr Hörgerät automatisch eingeschaltet. Durch einfaches Öffnen des Batteriedeckels schalten Sie es aus.

### B2

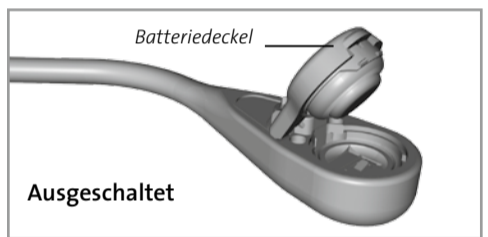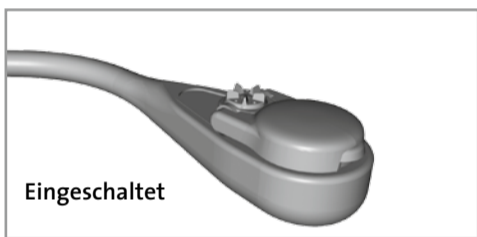

#### 1. Batterie entfernen


Öffnen Sie den Batteriedeckel. Entfernen Sie die Batterie mit dem beiliegendem Magnetstift aus dem Batteriedeckel.

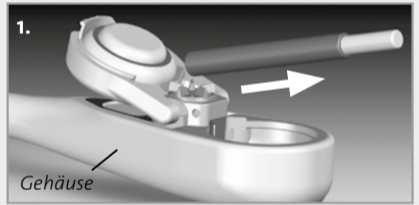

#### 2. Batterie einsetzen

Setzen Sie die neue Batterie (Typ 312) mit dem "+"-Zeichen nach oben in das Gehäuse oder den magnetischen Batteriedeckel ein und schließen Sie den Deckel – das Hörgerät ist automatisch eingeschaltet!



Achtung: Bei cross/bicross-Systemen werden zwei Batterien Typ 312 benötigt.

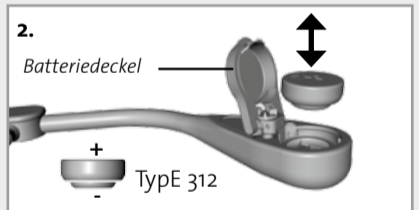

### C

#### Der Lautstärksteller

Mit dem Lautstärksteller regulieren Sie je nach Ihrem persönlichen Bedarf die gewünschte Lautstärke Ihres Gerätes.

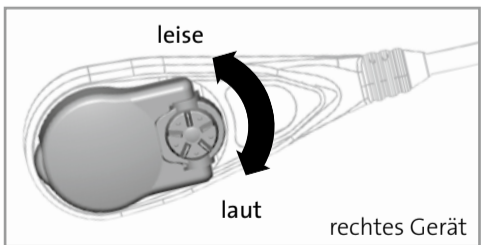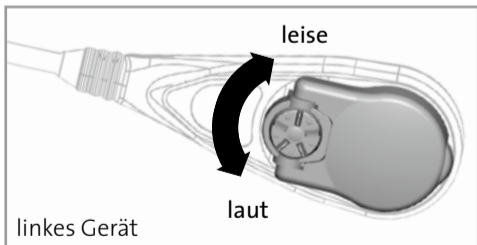

### D

#### Der Hörprogrammtaster

Durch Drücken des Hörprogrammtasters stellen Sie die von Ihrem Hörgeräteakustiker festgelegten Hörprogramme ein.

