


la belle BC

bruckhoff
hannover

Wij verwelkomen u in de wereld van het digitale horen.

Eerst en vooral willen we u hartelijk feliciteren. Met dit apparaat hebt u een Duits topproduct 'Made in Germany' gekocht. Deze gebruiksaanwijzing helpt u en uw kind er snel mee vertrouwd te raken.

Wij wensen u alvast veel plezier met dit product.

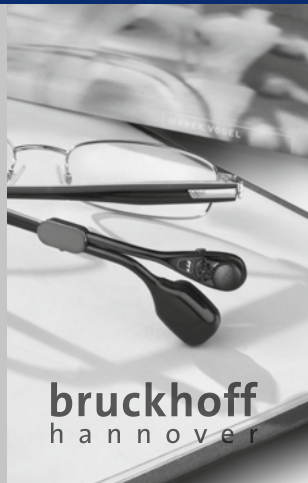bruckhoff
hannover

Algemene gebruiks - en onderhoudsaanwijzing

■ Richtlijnen voor het onderhoud van het apparaat

Uw verdeler van hoorapparaten kan u verscheidene onderhoudsmiddelen aanbieden. Let er bij het reinigen op dat er geen vloeistof in het apparaat loopt.

■ Enkele tips voor het dagelijkse gebruik:

- Bescherm het apparaat tegen hitte en vochtigheid.
- Laat uw apparaat niet op de grond vallen.
- Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt.

■ Zet het apparaat af bij een van volgende activiteiten gaat:

- als u zich gaat wassen of douchen
- als u een droogkap of haardroger gebruikt
- als u haarspray gebruikt
- als u als patiënt met hogefrequentiegolven of ultrasone golven behandeld wordt

■ Afvalverwerking

Een oud apparaat en oude batterijen mag u niet bij het huisvuil werpen. Uw verdeler van hoorapparaten zal deze graag vakkundig voor u verwerken.



■ Service en garantie

Mocht uw apparaat niet functioneren, wend u dan tot uw verdeler van hoorapparaten, nadat u eerst de volgende punten gecontroleerd hebt:

- Is het apparaat ingeschakeld?
- Werd er een nieuwe batterij geplaatst?

Probeer niet om zelf herstellingen aan het apparaat uit te voeren.

⚠ Algemene waarschuwingen

- Batterijen buiten het bereik van kinderen houden. Indien batterijen worden ingeslikt, kunnen zij een gevaar voor de gezondheid betekenen. In zulk geval dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.
- Niet in ruimtes met explosiegevaar gebruiken.
- Enkel voor u persoonlijk bestemde hoorapparaten gebruiken. Andere apparaten kunnen geen werking hebben of het gehoor beschadigen.
- Röntgenstralen kunnen het apparaat beschadigen.
- Waarschuwingssignalen die van achteren komen kunnen bij hoorapparaten met multimicrofoontechniek soms ontoereikend waargenomen worden.



B07076 | 0310

0123

la belle BC

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 511-16700-0
E-Mail: service@bruckhoff.com


www.bruckhoff.com

bruckhoff
hannover


Handleiding

Het bedieningsgedeelte

Met het bedieningsgedeelte van het hoorapparaat kan u speciale functies makkelijk zelf instellen.

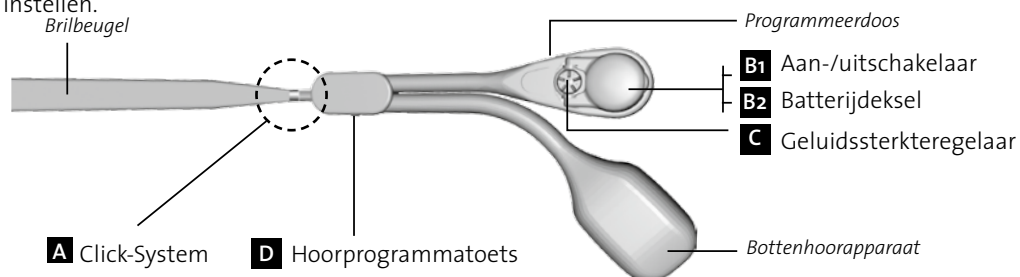

A

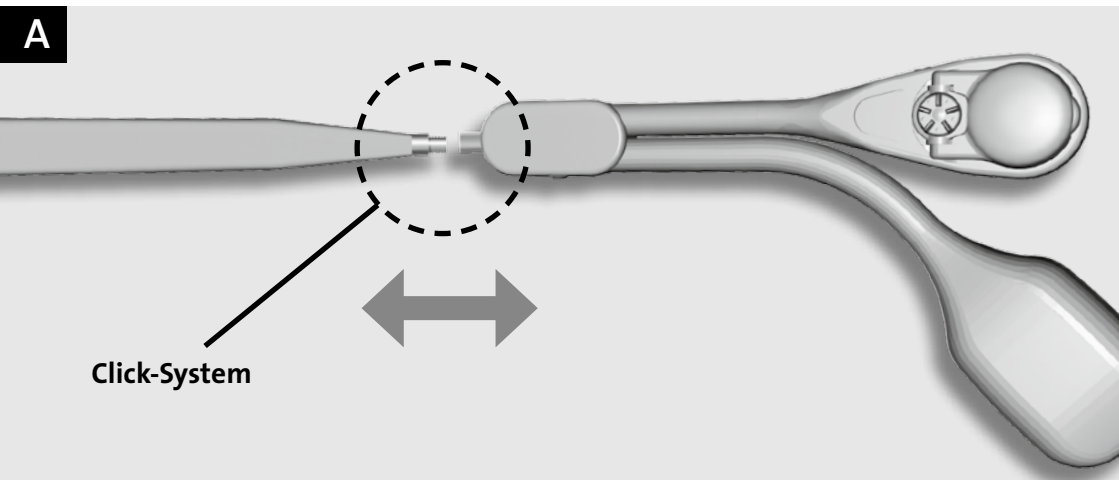



Click-System

B1

B2


In-/uitschakelen van het hoorapparaat

Het in- en uitschakelen van het hoorapparaat is uiterst eenvoudig. Als het batterijdeksel gesloten is, is het apparaat automatisch ingeschakeld. Door gewoon het batterijdeksel te openen, wordt het apparaat uitgeschakeld.

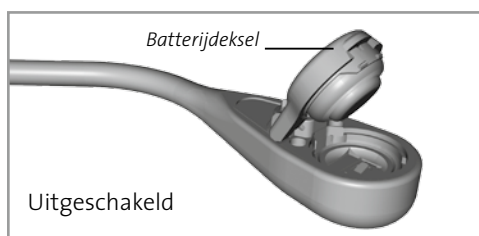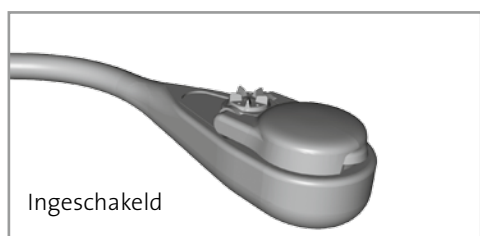



1. Batterij verwijderen

Open het batterijdeksel. Verwijder de batterij met de bijgevoegde mangelstift uit het batterijdeksel.

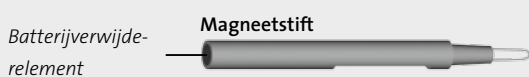

2. Batterij plaatsen



Plaats de nieuwe batterij (type 312) met de pluskant naar boven in de behuizing of het magnetische batterijdeksel en sluit het deksel – het hoorapparaat is nu automatisch ingeschakeld.

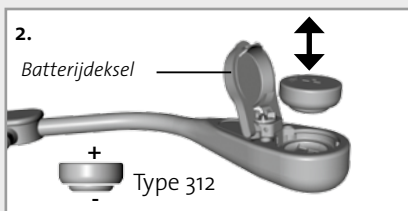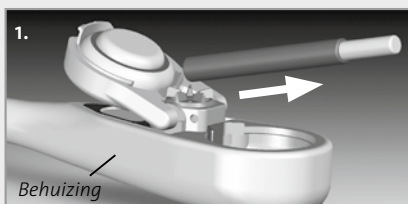

C

De geluidssterkteregelaar

Met de geluidssterkteregelaar kan u volledig naar eigen wens de gewenste geluidssterkte voor uw apparaat instellen.

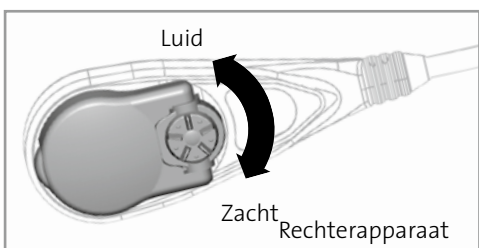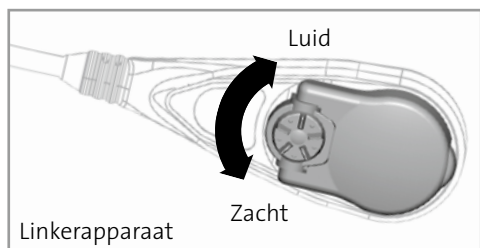

D

De hoorprogramma-toets

Door op de hoorprogramma-toets te drukken, stelt u het door uw verdeler van hoorapparaten vastgelegde akoestische type in.

