

la belle
la belle²

bruckhoff
hannover

Bienvenue dans le monde de l'écoute digitale

*Permettez-nous avant tout de vous féliciter.
En achetant cet appareil, vous avez acquis un produit haut de gamme „Made in Germany“. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser rapidement avec votre nouvel appareil.*

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à entendre.



bruckhoff
hannover

Conseils généraux d'utilisation et d'entretien

Conseils concernant l'entretien de l'appareil

Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Quelques conseils concernant l'utilisation au quotidien

- Protégez l'appareil contre la chaleur et l'humidité.
- Evitez de faire tomber votre appareil.
- Retirez la pile en cas de non-utilisation prolongée.

Retirez l'appareil lors des activités suivantes

- quand vous lavez ou prenez votre douche
- quand vous utilisez un casque ou un sèche-cheveux
- quand vous appliquez de la laque
- quand vous faites l'objet d'un traitement médical utilisant des appareils à haute fréquence ou d'échographie

Elimination

Ne pas éliminer l'appareil et les piles usagés avec les ordures ménagères. Rendez-les à votre audioprothésiste, il s'en chargera pour vous avec plaisir.



Service et garantie

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, veuillez-vous adresser à votre audioprothésiste après avoir vérifié les points suivants :

- Votre appareil est-il allumé ?
- Avez-vous installé une pile neuve ?

N'essayez pas vous-même de réparer l'appareil.

⚠ Précautions

- Conserver les piles hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Elles nuisent à la santé en cas d'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas installer dans des pièces présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez que les appareils auditifs qui vous ont été prescrits personnellement. D'autres appareils pourraient être inefficaces ou endommager l'ouïe.
- Les rayons X peuvent endommager l'appareil.
- En ce qui concerne les appareils auditifs équipés de plusieurs microphones, la perception de signaux d'avertissement venant de l'arrière peut être insuffisante.

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Allemagne

Tel: +49 (0) 511 - 167 00 - 0
Fax: +49 (0) 511 - 167 00 - 50
service@bruckhoff.com

www.bruckhoff.com

la belle
la belle²

bruckhoff
hannover



CE

0123

Mode d'emploi


Les trois éléments principaux des lunettes auditives la belle et la belle 2

1 Les lunettes avec branches de lunette 2 Click-System 3 Module auditif avec 3.1 élément de commande. Le module auditif peut être clipsé et déclipé simplement avec le **click-system**.

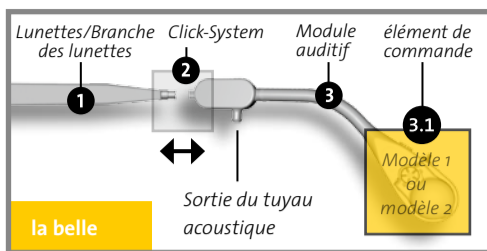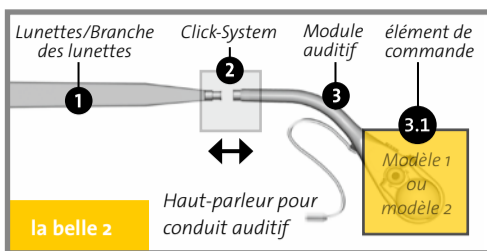


Fonctions de l'élément de commande pour ... 3.1 ... la belle et la belle 2

Touche du programme d'écoute (Modèle 1)

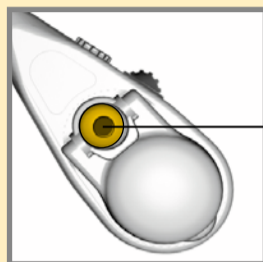

Touche du programme d'écoute


Touche du programme d'écoute (Modèle 2)

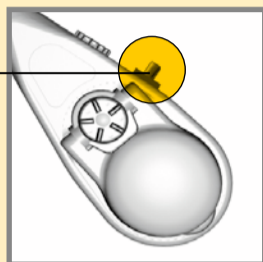

Touche du programme d'écoute


La **touche du programme d'écoute** vous permet de régler les programmes d'écoute déterminés par votre audioprothésiste.

Commande de réglage du volume (Modèle 1)

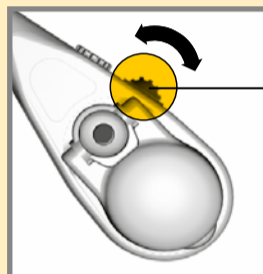

Commande de réglage du volume

Commande de réglage du volume (Modèle 2)

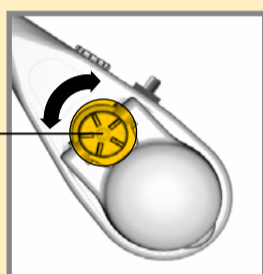


Commande de réglage du volume



La commande de réglage du volume vous permet de régler le volume de votre appareil en fonction de vos besoins.

Attention: tous les modèles ne sont pas équipés d'un réglage du volume ou d'une touche de programme d'écoute.

Mise en marche / Arrêt, Couvercle de la pile (Tous les modèles)

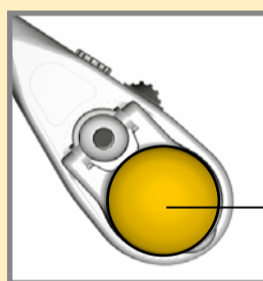


Marche / Arrêt
Couvercle de la pile

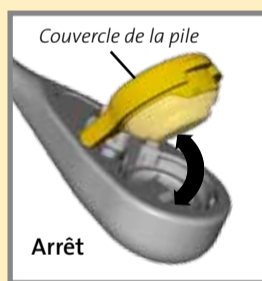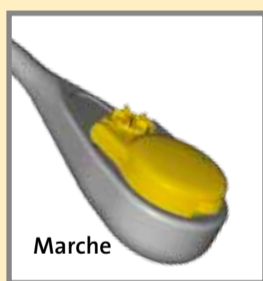


Identique chez tous les modules auditifs: Il est très facile d'allumer et d'éteindre l'appareil auditif. Quand le cache du compartiment à pile est fermé, l'appareil auditif est automatiquement allumé. Pour l'éteindre, il suffit d'ouvrir le cache du compartiment à pile.

Pour retirer la pile (Tous les modèles)

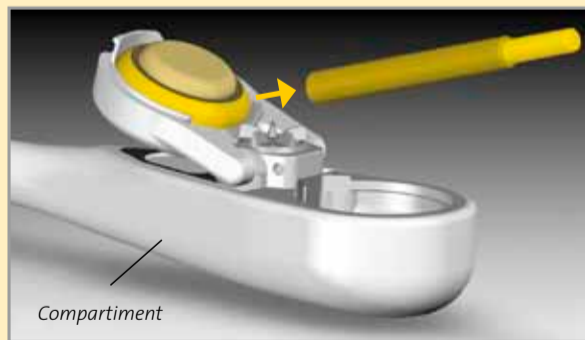


Manuel de montage:

Ouvrez le cache du compartiment à pile. Retirez la pile du cache du compartiment à pile en vous servant de la tige magnétique.

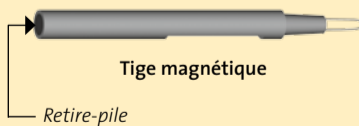

Pour installer la pile (Tous les modèles)

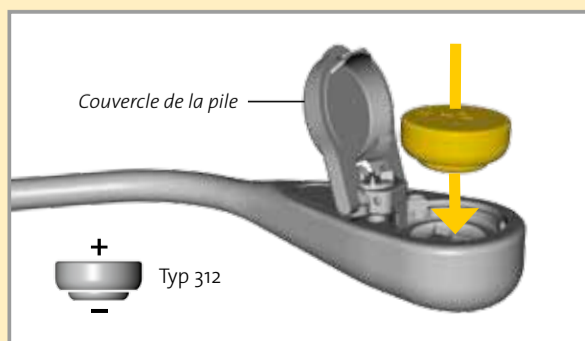

Manuel de montage:

Insérez la nouvelle pile (type 312) avec le "+" vers le haut dans le compartiment à pile ou le cache magnétique et fermez le cache - l'appareil s'allume automatiquement !

Attention: en cas de système CROS et BiCROS, vous devez utiliser 2 piles de type 312.