



IT

la belle
la belle²bruckhoff
hannover

Vi diamo il benvenuto nel mondo dell'ascolto digitale

Congratulazioni per aver scelto un prodotto tedesco „Made in Germany“ di primissima qualità.

Le presenti istruzioni per l'uso Vi aiutano a familiarizzare rapidamente con il Vostro apparecchio nuovo.

Vi auguriamo un buon ascolto

bruckhoff
hannover

Indicazioni generali sull'uso e sulla manutenzione

Indicazioni per la manutenzione dell'apparecchio

Il vostro audioprotesista ha a disposizione vari prodotti per la manutenzione dell'apparecchio acustico. Durante la pulizia assicurarsi che nessun liquido bagni l'apparecchio.

Alcuni consigli per l'uso quotidiano

- Preservare l'apparecchio dal caldo e dall'umidità.
- Evitare che l'apparecchio cada a terra.
- Rimuovere la batteria in caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio.

Rimuovere l'apparecchio durante lo svolgimento delle seguenti attività:

- quando ci si lava o durante la doccia
- quando si usa un casco asciugacapelli o un asciugacapelli
- quando si usano prodotti per capelli
- quando ci si sottopone ad un trattamento ad alta frequenza o ad ultrasuoni

Smaltimento

Non smaltire l'apparecchio vecchio o le batterie usate nei rifiuti domestici. Rivolgetevi all'audioprotesista per uno smaltimento corretto.



Assistenza e garanzia

Se l'apparecchio non dovesse funzionare, rivolgersi al proprio audioprotesista dopo aver verificato quanto segue:

- L'apparecchio è acceso?
- La nuova batteria è inserita?

Non tentare di riparare l'apparecchio da soli.

⚠ Avvertenze generali

- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali. In caso di ingestione, consultare subito un medico.
- Non usare l'apparecchio in luoghi a rischio di esplosione.
- Usare solo il proprio apparecchio acustico personale. Altri apparecchi potrebbero essere inefficaci o danneggiare l'udito.
- I raggi X possono danneggiare l'apparecchio.
- Il rilevamento dei segnali di ritorno potrebbe essere inadeguato negli apparecchi con tecnologia multi-microfono.

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
La Germania

Tel: +49 (0) 511 - 167 00 - 0
Fax: +49 (0) 511 - 167 00 - 50
service@bruckhoff.com



www.bruckhoff.com

la belle
la belle²

Istruzioni

I tre elementi principali degli occhiali acustici la belle e la belle 2

1 Gli occhiali con le stanghette 2 Click-System 3 Modulo acustico con 3.1 display.
Il modulo acustico può essere facilmente inserito o rimosso con il sistema a scatto.

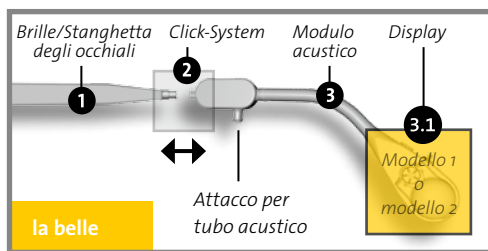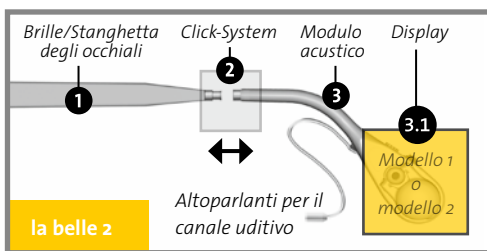


Funzioni del display per ...

3.1


... la belle e la belle 2

Pulsante cambio programma (Modello 1)

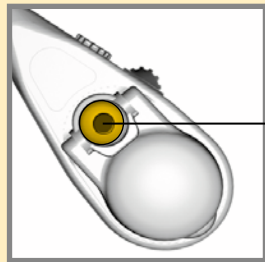

Pulsante cambio programma


Pulsante cambio programma (Modello 2)

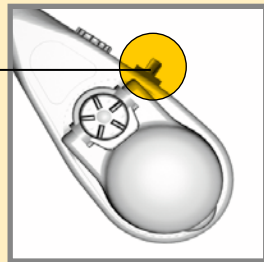

Pulsante cambio programma


Con il **pulsante cambio programma** acustico si regolano i programmi acustici impostati dal Vostro audio-protesista.

Regolazione del volume (Modello 1)

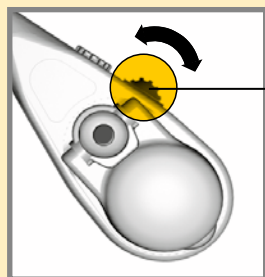

Regolazione del volume

Regolazione del volume (Modello 2)

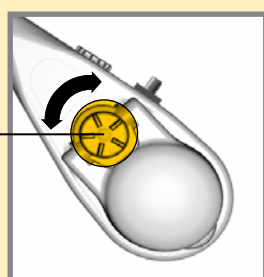


Regolazione del volume


Con il controllo volume si regola il volume dell'apparecchio acustico, in base alle esigenze personali.

Attenzione: non tutti i modelli sono dotati di un tasto per la regolazione del volume o del programma uditivo.


Interruttore ON / OFF, Sportello batteria (tutti i modelli)

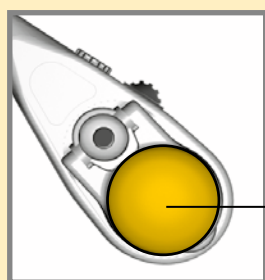

Acceso / Spento Sportello batteria

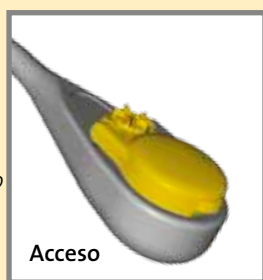

Acceso

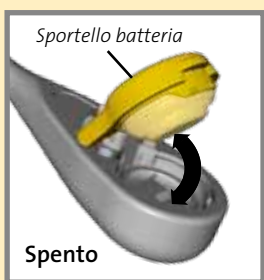

Sportello batteria

Spento

Comune a tutti i modelli: L'accensione/lo spegnimento dell'apparecchio acustico sono estremamente semplici. Si accenderà automaticamente con la chiusura dello sportello batteria, mentre per spegnerlo sarà sufficiente aprire lo sportello batteria.

Rimozione della batteria (tutti i modelli)



Sportello batteria

Istruzioni:


Aprire il coperchietto del vano batteria. Rimuovere la batteria usando la penna magnetica in dotazione.



Penna magnetica

Magnete per la rimozione della batteria

Inserimento della batteria (tutti i modelli)

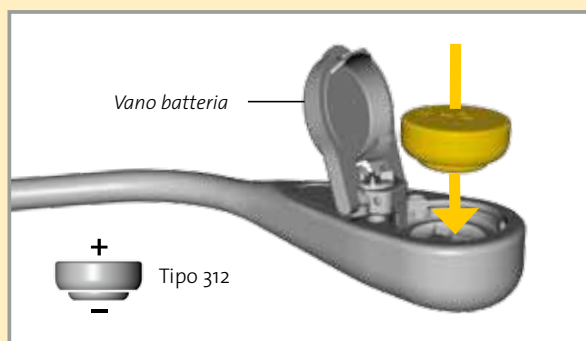

Vano batteria

+
-
Tipo 312

Istruzioni:

Inserire la nuova batteria (tipo 312) con il simbolo "+" rivolto verso l'alto nel vano batteria o nello sportello magnetico e chiudere lo sportello – l'apparecchio acustico si accenderà automaticamente!

Attenzione: nei sistemi CROS/BICROS sono necessarie due batterie di tipo 312.