

la belle
la belle²bruckhoff
hannoverbruckhoff
hannover

Witamy w świecie cyfrowego słuchu

Gratulujemy zakupu. Kupując ten aparat nabyłeś produkt niemieckiej produkcji o najwyższej jakości „Made in Germany“.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Tobie i Twojemu dziecku zapoznać się szybko z obsługą aparatu.

Życzymy dużo zadowolenia podczas użytkowania tego produktu.

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji

Wskazówki dotyczące pielęgnacji aparatu

Twój protetyk słuchu dysponuje różnymi preparatami pielęgnacyjnymi. Podczas czyszczenia należy zwracać uwagę na to, aby żaden płyn nie dostał się do aparatu.

Zalecenia dotyczące codziennego użytkowania

- Aparat należy chronić przed wysoką temperaturą i wilgocią.
- Należy zwracać uwagę na to, aby aparat nie spadł na ziemię.
- Jeżeli aparat przez dłuższy czas nie jest używany, to należy wyjąć baterię.

Aparat słuchowy należy wyjąć podczas wykonywania następujących czynności:

- podczas mycia i brania prysznicza
- przy używaniu suszarki hełmowej oraz normalnej suszarki do włosów
- podczas używania lakieru do włosów
- jeżeli jesteś leczony przy użyciu aparatów o wysokiej częstotliwości lub sonografu

Utylizacja

Starego aparatu i zużytych baterii nie wyrzucaj do domowych śmieci. Twój protetyk słuchu zutylizuje to dla Ciebie chętnie i fachowo.



Serwis i gwarancja

Jeżeli aparat słuchowy nie będzie funkcjonował, to należy zwrócić się do protetyka słuchu po uprzednim sprawdzeniu następujących punktów:

- Czy aparat jest włączony?
- Czy włożona jest nowa bateria?

Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy aparatu.

! Ogólne wskazówki ostrzegawcze

- Baterie trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. W przypadku ich połknięcia zagrażają one zdrowiu, dlatego też należy w takich przypadkach natychmiast udać się do lekarza.
- Nie stosować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
- Używaj aparatów słuchowych przeznaczonych tylko specjalnie dla Ciebie. Inne aparaty mogą nie mieć odpowiedniego działania bądź spowodować uszkodzenie słuchu.
- Promienie rentgenowskie mogą uszkodzić aparat słuchowy.
- Sygnały ostrzegawcze dobiegające z tyłu mogą być niewystarczająco dobrze odbierane w przypadku aparatów słuchowych z technologią wielomikrofonową.

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Niemcy

Tel: +49 (0) 511 - 1 67 00 - 0
Fax: +49 (0) 511 - 1 67 00 - 50
service@bruckhoff.com

www.bruckhoff.com

la belle
la belle²bruckhoff
hannover



CE

0123

Instrukcja obsługi

Trzy główne elementy okularów z modułem słuchowym la belle i la belle 2


1 Okulary z zausznikami 2 Click-System 3 Moduł słuchowy z 3.1 elementem obsługowym. Moduł słuchowy można zakładać i zdejmować w prosty sposób za pomocą systemu na zatrzask.

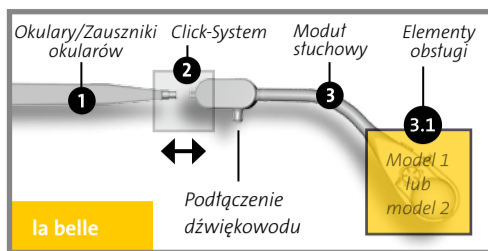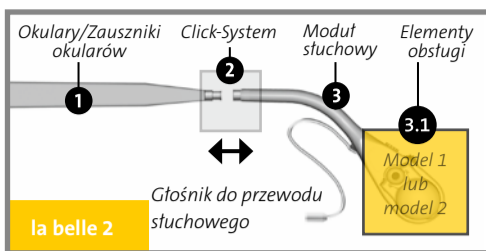

Funkcje elementu obsługowego dla ...


3.1 ... la belle i la belle 2

Przycisk zmiany programów słuchania (Model 1)

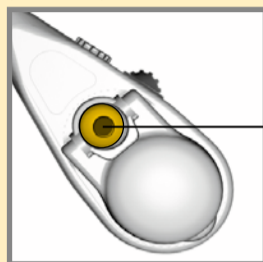

Przycisk zmiany programów słuchania


Przycisk zmiany programów słuchania (Model 2)

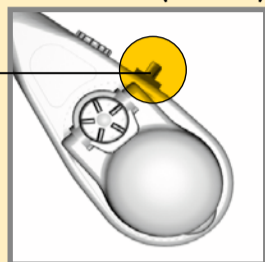

Przycisk zmiany programów słuchania


Poprzez naciśnięcie przycisku wyboru programów słuchania można nastawić programy słuchania ustalone przez protetyka aparatów słuchowych.

Regulator głośności (Model 1)

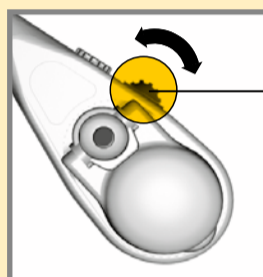

Regulator głośności

Regulator głośności (Model 2)

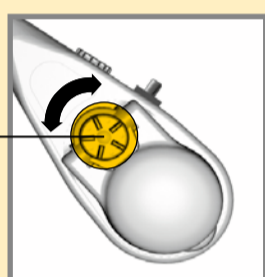


Regulator głośności

Przy pomocy regulatora głośności można indywidualnie ustawić żądany poziom głośności aparatu słuchowego.

Uwaga: Nie wszystkie modele posiadają regulator głośności bądź przycisk wyboru programów słuchania.

Włącznik / Wyłącznik, Kieszonka baterii (wszystkie modele)

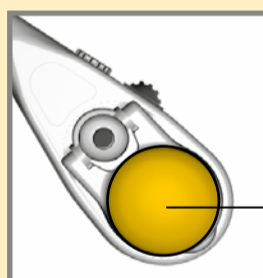

Włącznik / Wyłącznik, Kieszonka baterii



Włączony



Wyłączony

Tak samo we wszystkich modułach słuchowych: Włączanie i wyłączanie aparatu słuchowego jest bardzo proste. Jeżeli pokrywka kieszonki baterii jest zamknięta, to aparat jest automatycznie włączony. Wyłączenie aparatu następuje poprzez otwarcie pokrywki kieszonki baterii.

Wymiana baterii (wszystkie modele)



Instrukcja:


Otwórz kieszonkę baterii. Wyjmij baterię z kieszonki za pomocą załączonego magnetycznego sztyftu.



Sztyft magnetyczny

Wymiana baterii

Włóż baterię (wszystkie modele)

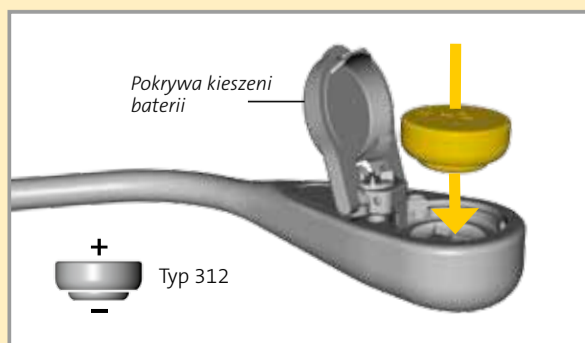

Instrukcja:

Włóż nową baterię (typ 312) znakiem „+” do góry albo bezpośrednio do obudowy albo do magnetycznej pokrywki kieszonki i zamknij kieszonkę – aparat słuchowy jest automatycznie włączony!

Uwaga: W przypadku systemów CROS i Bi-CROS wymagane są dwie baterie typu 312.